

Laifen Wave Elektrikli Diş Fırçası

Kullanım kılavuzu

laifen

İçeriği:

İngilizce Deutsch Français Español Italiano

laifen Wave Elektrikli Diş Fırçası

İçeriği:

Önemli Güvenlik İpuçları
Mevzuata Uygunluk Bilgileri
Paket İçeriği & Cihaz Özellikleri
Doğru Fırça Başlığını Seçmek
Fırçalama Deneyiminize Başlamak
Uygulamaya Bağlanmak
Şarj Bilgileri
Sorun giderme
Aşırı ısınma
İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri
Pil İmha Bilgileri
İade Politikası
Garanti & Destek
Ürün Özellikleri
Faydaları

Önemli Güvenlik İpuçları

Tehlike

1. Cihazı veya pili maruz bırakmayın Aşırı yüksek sıcaklıklar.
2. Temas eden metal nesnelerin Terminal pille çalışan cihazların veya gücün Kaynaklar kısa devreye neden olabilir.
3. Pil sızıntısı tespit edilirse derhal kesmek kullanmak. Sızdıran pilleri yerel çevre yasalarına uygun yönergeleri Sızdıran pilleri aşağıdakilerle birlikte atmayın: düzenli evsel atıklar.
4. Şarj bileşenlerini Bu cihaz nemli bir ortamda veya suda.
5. İçinde sıvı varken şarj etmeyin. bu şarj portu.
6. Bu cihaz yalnızca Güvenlik fazladan Alçak Hacimtage işaretlerine karşılık gelir.

Uyarı

1. Bu cihaz değiştirilemez içerir Pil. Pilin ömrü sona erdiğinde, lütfen takip edin uygun şekilde imha etmek için geri dönüşüm talimatları in cihaz.
2. Etkili pil şarjı sağlamak için şarj edin bu 0°C ila 30°C arasındaki bir ortamda cihaz.
3. Güç ünitesini herhangi bir sorunhasar.Hasar tespit edilirse derhal açısından düzenli olarak inceleyin kullanmayı bırakın ve derhal değiştirin.
4. Cihaz hasarlı görünüyorsa, hemen kesmek kullanmak.
5. Bunu değiştirmeye veya onarmaya Cihaz açık Kendi. çalışmayın
6. Bu cihazı tiner ile temizlemeyin, Çözücüveya kimyasal maddeler.
7. Bu cihazı 1'den daha derin suda kullanmayın. metre 30 dakikadan fazla.

Dikkat

1. Bu cihazı ilk kez kullanırken bu temizleme yöntemi. Başlamanızı öneririz

kuvvethafif rahatsızlık veya küçük dış eti

Harici

bu temizleme yöntemi. Başlamanızı öneririz

Mod 1 ile. Herhangi bir başlangıç rahatsızlığı genellikle 1-2 hafta içinde azalır, ancak devam ederse 2 haftadan sonra kullanmayı bırakın ve danışın dişçi.

2. Bu cihaz güvenlik standartlarına uygundur elektromanyetik için Aygıtları. Herhangi bir endişeniz için kalp pilleri veya diğer implante edilmiş Aygıtları lütfen bir doktora veya tedarikçiye danışın. Kullanmadan önce implante edilmiş cihaz.
3. Bu cihazı yalnızca kullanım amacı için kullanın. Açıklanan bu kılavuzda.
4. Diş restorasyonları olan kullanıcılar Ortodontik apareyler veya diş implantları bunu kullanmalıdır bir diş hekiminin rehberliğinde cihaz. Eğer sen deneyim gözle görülür kanama, rahatsızlık, ağrı, veya diğer tıbbi sorunlar, bir diş hekimine danışın veya doktor.
5. Bu cihaz aşağıdakiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır: kişiler (dahil çocuklar) fiziksel olarak azalmış, duyuşal veya zihinsel yetenekler veya deneyim ve bilgi, eğer olmadıkça verilen denetim veya talimat kullanımı ile ilgili in cihaz, kendi işlerinden sorumlu bir kişi tarafından emniyet. Çocuklar gözetim altında tutulmalıdır sağlamak cihazla oynamadıklarını.
6. Fırça başlığını değiştirmenizi öneririz her üç ay. Fırça başlığı hasarlıysa veya deforme olmuşsa, lütfen hemen değiştirin.
7. Bu cihaz yalnızca resmi cihazlarla uyumludur. Laifen için tasarlanmış elektrikli diş fırçası fırça başlıkları bu cihaz. Sorumluluk kabul etmiyoruz için Resmi olmayan fırça kullanmanın sonuçları Kafa.

Mevzuata Uygunluk Bilgileri

FCC Uyarısı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. İşlem aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) Bu cihaz zararlı olamaz girişim ve (2) bu cihaz herhangi bir paraziti kabul etmelidir neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan istenmeyen işlem. Herhangi bir değişiklik veya modifikasyon

sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış için uyumluluk, kullanıcının yetkisini geçersiz kılabılır ekipmanı çalıştırın.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve bulunmuştur. Hedef B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uymak, FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca. Bunlar Limitler makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır bir konutta zararlı enterferansa karşı kurma. Bu ekipman üretir, kullanır ve radyo frekansı enerjisi yayar ve değilse Yüklü ve talimatlara uygun olarak kullanılır, radyoda zararlı parazitte neden olabilir İletişim.Ancak, bunun garantisi yoktur belirli bir girişimde bulunmayacak kurma. Bu ekipman zararlı radyo veya televizyon alımına müdahale, hangi ekipman kapatılarak belirlenebilir ve açık, kullanıcı düzeltmeye çalışmaya teşvik edilirbu aşağıdakilerden biri veya daha fazlası tarafından müdahale

Önlemler:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
ekipmanve alıcı.
 - Aralarındaki ayrımı artırır.
devre alıcının olduğundan farklı
 - Ekipmanı bir prize bağlayın.
 - Bayiye veya deneyimli bir radyo/TV'ye danışın teknisyen yardım için.
- Cihaz, genel gereksinimleri karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir.RFmaruz kalma gereksinimi. Cihaz kullanılabılır taşınabilir maruz kalma koşulunda kısıtlama.

İC Uyarısı

Bu cihaz Industry Canadas ile uyumludur lisanstan muaf RSS'ler. İşlem aşağıdakilere tabidir iki koşul:(1) Bu cihaz neden olmayabilir girişim ve (2) Bu cihaz herhangi bir neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere girişim İstenmeyen cihazın çalışması.

Cihaz, genel RF'yi karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Teşhir gereksinim. Cihaz şu alanlarda kullanılabılır kısıtlama olmaksızın taşınabilir maruz kalma koşulu.

Bu cihaz RSS ile uyumludur Endüstri Kanada Muaf Radyo Cihazları için Geçerlidir lisans. Her ikisinde de istismara izin verilir Koşulları (1) Cihaz üretmemelidir.

ve (2) cihazın kullanıcısı almak Yaşanmış herhangi bir radyo frekansı paraziti, müdahalenin tehlikeye girmesi muhtemeldir. İşlem. Cihaz, karşılayacak şekilde derecelendirilmiştir genel RF'ye maruz kalma gereksinimleri. Cihaz Peut maruz kalma koşulları altında kullanılabilir sınırsız taşınabilir.

Cihaz Özellikleri

Ürün Adı : Wave Elektrikli Diş Fırçası

Modeli : LFTB01-S / LFTB01-A / LFTB01-P

Çalışma Gerilimi : 7.6V

Çalışma Gücü : 6W

Şarj Girişi : 5V 1A

Pil Kapasitesi : 900mAh

Şarj Süresi : 2,5 Saat~ IP

Kodu : IPX7





Doğru Fırça Başlığını Seçmek

Dış Eti Bakımı (CS)

Derinlere ulaşan ultra ince ve yumuşak kıllar diş boşlukları, nazık bir temizlik sağlar hem diş etleri hem de dişler. Bireyler için uygundur günlük yaşamları için nazık bir deneyim arıyorlar Fırçalama.

Süper Temiz (GS) Dişe uyan C şeklinde kıl tasarımı yüzeylerin kapsamlı bir şekilde temizlenmesini sağlar. hiçbir noktayı kaçırmaz. Bireyler için uygundur beyazlatan etkili fırçalama arayışı ve dişleri temizler.

Ultra Beyazlatma (ABD)

Artan W şeklinde kıl tasarımı

Daha parlak bir gülümseme için parlatma alanı.

Uygun güçlü temizlik arayan kişiler için dişleri beyazlatın.

Fırçalama Deneyiminize Başlama

1. Fırça Başlıklarının Takılması ve Değiştirilmesi

Takma: Fırça kafasının kollarını hizalayın ile diş fırçası sapının önü. Basın fırça başlığını motor miline doğru takmaktutamağa kadar, hafif bir iki parça arasındaki boşluk (<1 mm'lik bir boşluk gerekli operasyon için).

Değiştirme : Kolu tutun ve yavaşça itin fırça Çıkarmak için yukarı doğru ilerleyin. Ardından, Yeni fırça başlığı.

2. Açma/Kapama ve Arasında Geçiş Yapma Modu

Mod 2 : Günlük kullanıma ve kullanıcılara uygundur Ara -yan

Daha Akıllı İşlevler

Akıllı Uyandırma: Diş fırçasını bir noktaya kaldırın. Dik pozisyon onu duraklatılmış durumdan uyandırmak için. bu Güç ve mod göstergeleri daha sonra yanacaktır.

Fırçalama Zamanlayıcıları: 2 dakikalık kullanımdan sonra- diş fırçası titreyecek ve otomatik olarak Uyku moduna girecektir

Mod (zamanlayıcı duraklamadan etkilenmez, ancak olacak Uyku Moduna girdikten sonra sıfırlayın). Bu zamanlayıcı 1-5 dakika arasında ayarlanabilir **laifen** app Fırçalama Süresi altında; 30'lar Hatırlatıcısı ise uygulamada etkinleştirildiğinde, diş fırçası iki kez titreş değişiklik istemek için her 30 saniyede bir fırçalama alanı.

Uçuş Modu: Herhangi bir durumda, güce uzun basın düğme Uçuş Moduna girmek için 2 saniye; uzun Uçuş Modundan çıkmak için 2 saniye basın.

Şarj Bilgileri

Diş fırçasını şarj etmeniz gerekebilir önce ilk kez kullanıyorum. Lütfen aklınızda bulundurun Şarj olurken aşağıdakiler:

1. Cihazın alt kısmını düzgün şekilde bağlayın. diş fırçası şarj kablosu ile. Kullanmaktan kaçının hasan önlemek için kuvvet.
2. Manyetik şarj kablosunu bir USB- C güç adaptörü ve AC gücüyle şarj edin

çıkış 100-240V, 50/60Hz olarak derecelendirilmiştir. Şarj Gösterge ve bunlara karşılık gelen pil seviyeleri aşağıdaki gibi :

Pil Yüzdesi: %100 %99-%0 Gösterge Durumu: Sabit Yeşil Işık Yanıp
Sönen Yeşil Işık

3. Bu cihaz bir güç adaptörü içermez ve biri ayrıca satın alınmalıdır. Lütfen gibi nemli ortamlarda şarj etmekten kaçının Banyo elektrik güvenliğini sağlamak için.

Sorun giderme

Diş fırçası bir arıza yaşarsa düğmelerin yanıt vermediği ve Üç mod göstergesi ve güç göstergesi 1 saniyelik aralıklarla yanıp sönerseniz, lütfen iletişime geçin yardım


Aşırı ısınma

Diş fırçası motor sıcaklığı çok fazla olduğunda yüksek, üç mod göstergesi ve güç göstergesi birlikte yanıp sönecektir. Böyle bir durumda, derhal kullanmayı bırakın ve bitmesini bekleyin. sakın ol. için müşteri hizmetleri.

İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri

Mod
Gösterge

Güç
Gösterge

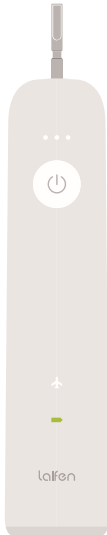



Bu Ürünün Doğru İmhası (Atık Elektrikli & Elektronik Ekipmanlar) (Uygulanabilir ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler) Ürün, aksesuarlar veya literatür, ürünün ve elektronik aksesuarları atılmamalıdır

diğer evsel atıklarla birlikte son çalışma hayatlarının. Olası zararları önlemek için çevreye veya insan sağlığına Kontrolsüz atık bertarafı, lütfen bu öğeleri ayırın diğer atık türlerinden ayırın ve geri dönüştürün Sorumlu sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek maddi kaynaklar. Ev kullanıcıları temas ya bunu satın aldıkları perakendeci ürün veya yerel hükümet ofisi için Şey bu eşyaları nereye ve nasıl götürebilecekleri konusunda çevre açısından güvenli geri dönüşüm için. İş kullanıcılar tedarikçileriyle iletişime geçin ve kontrol edin Satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşulları. Bu ürün ve elektronik aksesuarları diğer ticari atıklarla karıştırmamalıdır. Elden çıkarma.

Pil İmha Bilgileri

Laifen Elektrikli Diş Fırçası Li-ion içerirŞarjlı Pil. Genel olarak, yaşam beklentisi ve bu pillerin pil ömrü Kullanım bu yüzden onları boşaltılmış veya kullanılmamış halde bırakmaktan kaçının. uzun süreler. Dikkat: Açmayın, hasar veya pilleri iletken malzemelere maruz bırakın (metal), nem, sıvı, ateş veya ısı. Bunu yapmak Mayışpillerin akmasına veya patlamasına neden olarak kişisel yaralanmada. Dahili şarj edilebilir Pil potansiyel olarak zarar verebilecek maddeler içerir çevre ve sökülmesi gerekebilir uygun için ülkenize veya bölgenize göre geri dönüşüm

Kanun. Pil konusunda profesyonel rehberlik için Kaldırmaveya piller çıkarılamıyorsa, lütfen doğrudan Laifen'e danışın veya elektriği alın diş fırçası hükümet tarafından belirlenmiş bir geri dönüşüm merkezine.



Pil Çıkarma Adımları:

- Diş fırçasının kullanılmadığından emin olun Ücret.
- Diş fırçasının kapalı olduğundan emin olun.
- Elektrik cihazının alt kapağını açın diş fırçası.
- Kullanarak bağlantı kablolarını ayırın Yalıtımlı Araçları.
- Çıkarmak için gövdenin yan tokalarına basın bu tüm montajı yapın ve ardından pili çıkarın.

*Pili çıkardıktan sonra, diş fırçasıbir güç kaynağına bağlı değil.

laifen	Garanti & Destek 1 Yıllık Sınırlı Garanti
laifen	her ikisi için de 1 yıllık sınırlı garanti sunar bu laifen Elektrikli diş fırçası ve orijinali

manyetik şarj kablosu. Bir yıl içinde bu satın alma tarihi, ürününüz başarısız olursa malzeme veya işçilik hataları, onarım veya değiştirme sağlayacağız Hizmetleri. Lütfen not edin ki kullanılabilirlik stokta, yedek ünite gelebilir farklı bir renk veya eşdeğer bir model olabilir. Garanti yalnızca ülkesinde veya bölgesinde geçerlidir. satın alma.

Garanti kapsamında olmayanlar:

- Fırça başlıkları.
- Yetkisiz satıcılardan yapılan satın almalar.
- Garanti süresi dolmuş ürünler.
- Geçerli bir satın alma belgesi olmayan ürünler.
- Değiştirilmiş, değiştirilmiş veya Tamir Gayri resmi.
- Başka herhangi bir amaçla kullanılan ürünler dan dış fırçalamak.

Olmayan işlemlerden kaynaklanan hasarlar Anlaşma Laifen kullanım kılavuzu ile. Herhangi bir yanlış kullanım veya kazadan kaynaklanan hasarlar.

- Aşırı kullanımdan kaynaklanan hasarlar normal Yıpranma.
- Laifen olmayan fırça kullanımından kaynaklanan hasar Kafa.

Laifen'den Profesyonel Yardım Alın

Bizimle ilgili başka sorularınız varsa garantipolitika veya ürün kullanımı, lütfen çekinmeyin csTEAM@laifentech.com numaralı telefondan e-posta yoluyla bize ulaşın. Biz Geri bildiriminizi ve görünümünüzü çok takdir ediyorum size yardımcı olmak için ileriye gidiyorum.

Ürün Özellikleri

1. Dünyanın İlk 60° Salınımları & 66,000 Titreşim Yepyeni bir fırçalama yöntemiyle tanışın. bu Laifen Wave, ultra geniş 60°'yi birleştirir Salınım dakikada 66.000'e kadar titreşim ile, Köpüklü bir temizlik için üstün bir temizlik sunar gülümsemek.
2. Yumuşak TPU'ya Sahip Premium Fırça Başlıkları malzeme fırça başlıkları dişlere karşı naziktir ve Dişeti. Aşağıdakileri karşılamak için üç tipte mevcuttur size özel fırçalama ihtiyaçları.
3. Özelleştirilebilir Uygulama Kontrolü: Laifen Uygulaması ^{Sunmaktadır} Kişiselleştirilmiş bakım için 2.000 fırçalama ayarı.
- 2 dakikalık akıllı zamanlayıcı içerir. ^{Diş hekimini tarafından tavsiye edilir} fırçalama süreleri ve 30 saniyelik hatırlatma (uygulama aracılığıyla etkinleştirilir) ^{sağlamak} Her bölgede kapsamlı temizlik.
4. 45 Günlük Pili Ömrü Hızlı manyetik ^{Şarj cihazı} Laifen Wave sadece 2,5 saatte tamamen şarj olur ve tek şarjla 45 güne kadar dayanır. ^{Zevakime} Her zaman, her yerde sorunsuz fırçalama.
5. Kusursuz Tasarım: Kire elveda deyin. Bu Laifen Wave'in kusursuz tasarımı boşlukları ortadan kaldırır kir ve döküntülerin birikebileceği yerlerde, Temizlik yapmak Hızlı bir duruma kadar basit.
6. Neler Dahil: Laifen Wave diş fırçası kulp üç fırça başlığı, manyetik şarj kablosu, kullanım kılavuzu, 12 ay stressiz garanti, ve Güler yüzlü müşteri hizmetleri.
7. Not: Diş fırçasının şarj edilmesi gerekebilir önce ilk kullanım. Tipik olarak, gösterge ışığı yanar 5-10 dakikalık şarjdan sonra yanar ve diş fırçası yaklaşık 2–2,5 dakikada tam şarj olur saat (sabit yeşil ışıkla gösterilir).

Faydaları:

1. Çift Eylem Salınım Titreşimi Ultra geniş Salınım ve kapsamlı bir şekilde güçlü titreşimler diş ve diş etlerini temizlemek 60° Salınımlar 66.000 Titreşim / Dişler Üzerinde MinSoft.
 2. Premium Fırça Başlıkları. Dürüst Fiyatlı Fırça Baş 90 Güne Kadar Dayanır.
 3. Hızlı Şarj ve Uzun Ömürlü Pil 45 Gün Pil Tam şarj için ömür*2,5 saat.
 4. Akıllı Fırçalama Uygulaması.
 5. özelleştirilebilir modlar: 2.000'e kadar mümkün Fırçalama Ayarlar.
- Otomatik mod kaydetme. Modlar uygundur Kaydedilmiş gerçek zamanlı olarak.

laifen Elektrikli Diş Fırçası Dalgası

İçerik

Önemli güvenlik TALİMATLARI

Yasal Uyum Bilgi Paketi Yönetmelik

Paket içeriği ve ürün özellikleri

Doğru Fırça Başlığını Seçmek

Dişlerinizi fırçalamaya başlayın

Uygulamaya başlamak

Şarj bilgileri

Sorun giderme

Aşırı ısınma

İmha ve geri dönüşüme ilişkin bilgiler

Pillerin atılmasıyla ilgili bilgiler

İade Politikası

Garanti ve Destek

Ürün

Avantajları

Önemli güvenlik ipuçları



TEHLİKE

1. Cihazı veya pili koymayın Aşırı yüksek sıcaklıklar.
2. Kısa devre riskinin farkında olun, oluşturulur, metal nesnelerin terminaleri varsa pille çalışan cihazlar veya Kaynak dokunmak.

3. Pilde bir sızıntı tespit edilirse Olur Derhal kullanmayı bırakın. İmha etmek yerel kaynaklara göre sızıntı yapan piller Kanun ve çevre koruma yönergeleri. Sızıntı Piller normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır Atıldı olmak.

4. Bunun şarj bileşenlerini ayarlayın Su. nemli bir ortamda veya

5. İçinde sıvı varsa şarj etmeyin.sadece

Şarj portu .

6. Güvenlik nedeniyle diş fırçaları

göre özellikle düşük voltajlı olmak.

Cihaz üzerinde etiketleme



UYARI

1. Bu cihaz değiştirilemeyen piller içerir.
Lütfen talimatları izleyin

Piller kullanım ömürlerinin sonuna ulaştığında
ipnate

2. Etkili pil şarjı sağlamak için, salaam
0 °C ila 30 °C arasındaki sıcaklıkDurum

Cihazı ortam sıcaklığında şarj edin
pilin olmadığı yerler

tamamen şarj edilebilir veya

Şarj Verimliliği bozulmuştur.

Güç kaynağını düzenli olarak kontrol edin.

Hasar. Hasar tespit edilirse

3. Derhal kullanmayı bırakın

vehemen değiştirin.

4. Ürün hasarlı görünüyorsa, Kullanmayı
bırak.

Özellikle sap veya fırça başlığı,

5. Bu ürünü kendiniz kullanmaya çalışmayın Değiştirmek veya onarım.

6. Bu ürünü aşağıdakilerle temizlemeyin: Boya inceltici çözücüler veya kimyasal Madde.

7. 30 dakikadan fazla suda bekletmeyi kullanmak yani 1 metreden daha derin.



DIKKAT

1. Bu ürünü ilk kez kullanıyorsanız kullanılabilir hafif rahatsızlık veya hafif diş eti kanaması, Dişeti Bu temizleme yöntemine alışın olmazsa olmaz. Mod 1'i kullanmanızı öneririz başlamak. İlk rahatsızlık şu şekilde yankılanır:

Genellikle 1 ila 2 hafta içinde ama 2 haftadan uzun sürerse, Kullanmayı bırakın ve danışın Onlar bir diş hekimi. temas bir diş hekimi veya doktor.

2. Bu ürün Güvenlik standartları elektromanyetik cihazlar. Herhangi bir endişeniz varsa Kalp pillerine veya diğerlerine referans Implante Lütfen bizimle iletişime geçin.
- Bir doktora veya doktora kullanın Üreticisi implante edilmiş cihaz.
3. Bu ürün özel olarak aşağıdakiler için tasarlanmıştır: Temizleme dişlerin, diş etlerinin ve dilin Geliştirilen. Başkaları için kullanmayın Raptiye.
4. Sabit gibi diş restorasyonları olan kişiler Parantez veya diş implantları şunları yapabilmelidir: Diş hekimini rehberliğinde ürün kullanmak. Belirgin kanama varsa, rahatsızlık, ağrı veya diğer tıbbi Herhangi bir şikayetiniz varsa, lütfen iletişime geçin bir diş hekimini veya doktor.
5. Bu cihaz aşağıdakiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır: Kişi (çocuklar dahil) engelli güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından denetlenmedikçe veya cihazın güvenli kullanımı konusunda talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip veya sınırlı deneyim ve bilgiye sahip. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
6. Fırça başlıklarını başkalarıyla paylaşmayın.
7. Fırça başlığını her üç ayda bir değiştirmenizi öneririz. Fırça başlığı hasar görmüş veya deforme olmuşsa hemen değiştirin. Bu ürün yalnızca özel ürünlerle uyumludur.
8. Laifen elektrikli diş fırçasının fırça başlıkları ile uyumludur. Yetkisiz üçüncü taraf ürünlerini kullanmanın sonuçları için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Mevzuata uygunluk hakkında bilgi

Yönetmelik

FCC Bildirimi

Bu cihaz, Bölüm 15 ile uyumludur. FCC Düzenlemeleri. İşlem,
Aşağıdaki iki koşul: (1) Bu cihaz ^{Mayıs} zararlı rahatsızlıklara neden olmaz, ve (2) bu cihaz teslim alınmalıdır Bozukluk -ları yol açan rahatsızlıklar dahil

istenmeyen işlem. Tüm Değişiklik veya olmayan değişiklikler Kurallara uygunluk ilkesinde açıkça atıfta bulunulan Yönetmelik sorumlu taraf, yetkinin sona ermesine yol açabilir İşlem cihazın.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve karşılanmıştır. bu B Sınıfı dijital cihazlar için sınır değerler FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca. Bunlar Sınır -ları size bir zararlılara karşı yeterli koruma Bozukluk -ları bir konut kompleksinde. Bu cihaz Radyo frekansı enerjisi üretir ve kullanır Ve yayabilir. Eğer uygun değilse talimatlar kurulur ve kullanılır, Olabilir radyo trafiğine müdahale. O Ancak, bir Spesifikkurma.

Bu cihaz radyoda parazit algılasa veya Televizyon girdinin neden olduğu ve cihazın kapatılması algılanabili melibir veya daha fazlasının neden olduğu girişim

Aşağıdaki eylemleri düzeltin: * Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın. * Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın. * Cihazı, alıcının bağlı olduğu devrenin dışındaki bir elektrik prizine takın. * Bayi veya bir radyo/televizyon uzmanı ile iletişime geçin.

Cihaz, genel RF'ye maruz kalma gereksinimlerine göre değerlendirilmiştir. Cihaz, taşınabilir maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

IC Bildirimi

Bu cihaz, lisanssız RSS'lerle uyumludur ^{Kaynak} Sanayi Kanada. İşlem, Aşağıdaki iki koşul: (1) Bu cihaz ^{Mayıs} rahatsızlıklara neden olur ve (2) bu Cihaz tüm parazitleri kabul etmelidir, Dahil İstenmeyen çalışmaya neden olan arızalar cihazın. Cihaz Oldu için genel gerekliliklerle ilgili olarak RF'ye maruz kalma. Cihaz olabilir kısıtlama olmaksızın

kabul edilebilir maruz kalma koşulları olması durumunda kullanılabilir.

Bu cihaz lisanssız Radyo Standart Özellikleri von Industry Canada. Der işlem aşağıdaki ikisine tabidir Koşul -ları: (1) Bu cihaz aşağıdakilere müdahale etmemelidir: ve (2) bu cihaz tüm Bozukluk -ları olabilecek rahatsızlıklar dahil cihazın istenmeyen çalışması neden kutu.

Cihaz genel olarak test edilmiştir. Gereksinim -leri için RF'ye maruz kalma değerlendirildi. Cihaz olmadan kullanılabilir Kısıtlamaları taşınabilir için

Maruz kalma koşulları

Özellikler

Ürün Adı : Elektrikli Diş Fırçası Dalgası

Modeli : LFTB01-S/LFTB01-A/LFTB01-P

Çalışma Gerilimi : 7.6V

Çalışma Gücü : 6W

Şarj süresi: yaklaşık 2,5 saat

IP Kodu : IPX7



Şarj Girişi : 5V 1A

Pil Kapasitesi : 900mAh

Doğru Fırça Başlığını Seçmek

Diş Eti Bakımı (CS)

Derinlemesine nüfuz eden ultra ince ve yumuşak kıllar dişler arasındaki boşluklara uzanır ve nazik temizlik için endişe. Sahip olan kişiler için uygundur Günlük fırçalama sırasında nazik bir his dilemek.

Süper Temiz (GS)

Uyum sağlayan C şekilli kıl tasarımı diş yüzeyleri ve kapsamlı bir Temizlik, leke kalmamasını sağlar Özlü -yor. Sahip olan kişiler için uygundur verimli diş fırçalama dişleri beyazlatır ve temizler.

Ultra Beyazlatma (ABD) W şeklinde kıl tasarımı parlatma alanı ve için daha parlak bir gülümseme. İçin uygun yüksek performansa sahip insanlar Dişleri beyazlatmak için temizlik aramak.

Dişlerinizi fırçalamaya başlayın

1. Takma ve değiştirme

Fırça başlıkları

Ekle : Kılırları hizalayın

Kaynak. Fırça kafasını aşağı doğru itin
arasında olduğundan emin olun.

işlem, boşluk 1 mm'den küçük olmalıdır).

Değiştir: Kolu tutun ve
kaldırmak için. Ardından

2. Açın/kapatın ve arasında geçiş yapın

Güç düğmesine bir kez basın.

Geçiş yapılacak modlar:

Fırça başlığı dış fırçası sapının ön tarafında

tutamağa takmak için motor mili.

İki küçük bir boşluk var (bunun için

itmek fırça kafasını yavaşça yukarı doğru hareket ettirin,

Yeni Fırça.

buYol

Açma/duraklatma arasında geçiş yapmak için iki kez



Mod 1: İlk kullanıma uygundur ve Kişi hassas dişlerle.

Mod 2: Günlük kullanıma uygun Kullanmakve mükemmel olan insanlar

Temizleme sonuçları.

Mod 3: Kişiler için uygundur Plak çıkarma ve güçlü aydınlatma.

Çalışma sırasında temizlik şu şekilde gerçekleştirilir: Eşsiz

Duraklatıldı tuşuna basın. Diş fırçası

10 saniye duraklatıldı,



Akıllı Aktivasyon: Yükseltin



Diş fırçası onları dik konuma getirerek onları dik konuma getirin. Güç ve çalışma modu daha sonra yanacaktır.



uyku hali için LED'le

Zamanlayıcı: 2 dakikalık kullanımdan sonraDiş fırçasıve otomatik olarak uyku modu

(zamanlayıcı ile değiştirilmez) Etkileri durdurmak, ancak değişiklikten sonra

Uyku modunu sıfırla). Bu zamanlayıcı bu için "Fırçalama süresi" altındaki uygulama 1'den 5'e kadar tutanak. Eğer 30 saniyelik hatırlatma uygulamada etkinleştirildiğinde,

Diş fırçasını her 30 saniyede bir iki kez bu sıra alanının değiştirilmesi.

Uçak modu: Herhangi bir Koşul açmak için açma/kapama düğmesini 2 saniye basılı tutun uçuş modlarını değiştirmek için. Tutmak Tatmak 2 uçak moduna girmek için saniyeler

Pil Şarjı: %100-%50 %50-%20 %20-%10 %10-%0 Durum Göstergesi: Yeşil Sabit Işık Sarı Sabit Kırmızı Sabit Kırmızı Yanıp Sönen Işık.

Pil Şarjı : %0 Durum Göstergesi : Motor titreşimi durana kadar her 0,5 saniyede bir yanıp sönen kırmızı ışık.

Şarj bilgileri

Diş fırçasını kullanmanız gerekebilir yük onları ilk kez kullanmadan önce kutu. Lütfen şarj ederken dikkat edin Ertesi :

1. Diş fırçasının altını bağlayın hakkıyla manyetik şarj kablosu ile. Hasarı önlemek için güç kullanmayın kaçınmak.
2. Manyetik şarj kablosunu bağlayın Bir USB-C güç adaptörü ve 100-240 V, 50-60 Hz'lik elektrik prizi. bu yükleme göstergeleri ve ilgili Pil seviyeleri aşağıdaki gibidir:

Pil Şarjı: %100 %99-%0 Durum Göstergesi: Yeşil Sabit Yeşil Yanıp Sönen Işık

Bu ürün güç kaynağı olmadan gelir, gibi nemli ortamlarda şarj etme

Bu ayrıca satın alınmalıdır. Lütfen kaçının
ile B. elektrik güvenliğini sağlamak için banyolarda

Pilin nasıl atılacağına ilişkin bilgiler

Elektrikli diş fırçası şunları içerir: Lityum iyon piller. Genel olarak, kullanım ömrü değişir ve kullanıma bağlı olarak bu pillerin çalışma süresi. Kaçınmak Bu nedenle onları uzun bir süre boyunca boşaltırlar

veya kullanılmadan bırakın. Uyarı: Açık veya pillere zarar vermeyin ve iletken malzemeler (metal) kullanmazlar, Nem sıvılar, ateş veya ısı.

Aksi takdirde piller akabilir veya patlamak bu da yaralanmalara neden olabilir. bu Dahili piller şu maddeleri içerir: Çevre ve hangisi uyarınca

ülkenizin veya bölgenizin yasaları Genişletilmiş onları düzgün bir şekilde yönetmek için.

Geri dönüşüm. Bu konuda profesyonel rehberlik almak isterseniz Şuradan alın pillerin veya pillerin kaldırılamaz, İletişim Lütfendoğrudan Laifen'e veya halka elektrikli dış fırçası

Geri dönüşüm alanı.



Pili çıkarma adımları:

- Dış fırçasının olmadığından emin olun. Yüklü Olur.
- Dış fırçasının kapalıdır.
- Cihazın alt kapağını açın Elektrikli Dış fırçası.
- Bağlantı kablolarını İzole Alet.
- Yan braketlere basın Konut tüm montajı tamamlamak için ve ardından pili çıkarın dışarıya.

*Pili çıkardıktan sonra emindiş fırçasının bir güç kaynağına bağlı olmadığını

İade Politikası Hizmet dönmek 30 günden itibaren

30 günlük iade hizmeti sunmaktadır. İçinde Bir Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde, Bizden birleyle iletişime geçebilirsiniz. Temsilci Müşteri Hizmetleri e-posta ile csteam@laifentech.com İade sürecini başlatın.

Para iadesine hak kazanmak için şunları yapmalısınız:

Ürünü tüm aksesuarlarıyla birlikte iade edin Hediyelet dahildir.
Bunları orijinal ambalajlarında iade edin. Sağlamak geçerli bir satın alma belgesi.

- Ürünün ve Aksesuar-lar yeniden satılabilir.

İadelerde kargo ücreti:

- Laifen nakliye masraflarını karşılayacaktır. bu kalite sorunları nedeniyle iadeler ürün.
- Herhangi bir nedenle iade deniz Ürün kalitesi sorumluluktur ve bununla ilgili tüm maliyetler sevkiyat, dönmekmaliyetleri de dahil olmak üzere ürünün müşteri tarafından karşılanacaktır.

Laifen Garanti ve Destek 2 Yıllık Sınırlı Garanti

Laifen 2 yıllık sınırlı garanti sunar için Laifen Elektrikli diş fırçası ve kablosu orijinal manyetik yük. Bir yıla alma tarihinden itibaren, ürününüz kusurlar nedeniyle düzgün çalışmıyor Malzemeo üretim, sağlayacağız onarım veya değiştirme hizmetleri. Akınlızda bulunsun hesap bu, mevcudiyetine bağlı olarak stok, yedek ünite gelebilir çinde farklı bir renk veya eşdeğer bir model olabilir.

Garanti kapsamında olmayanlar:

- Fırça başlıkları
- Yetkili olmayan satıcılardan yapılan satın alımlar.

Garanti süresi dolmuş ürünler* . *

Geçerli bir satın alma belgesi olmayan ürünler.

- * Değiştirilmiş, değiştirilmiş ürünler ^{veya} gayri resmi olarak onarıldı.
- * Herhangi bir amaç için kullanılan ürünler amaç dışılarınızı fırçalamak dışında.
- * Olmayan faaliyetlerin neden olduğu hasar ^{Ayrıntı için} Laifen kullanım kılavuzuna.
- * Herhangi bir yanlış kullanımdan kaynaklanan hasar veya kaza.
Aşırı kullanımdan kaynaklanan hasarlar ^{deniz} normal aşınma ve yıpranma.
Fırça bulaşları
- * Kullanımından kaynaklanan hasar

Profesyonel yardım alın ^{Laifen}
Bizimle ilgili başka sorularınız varsa

ürünün garantisi veya kullanımı, lütfen çekinmeyin

Posta yoluyla bize ulaşın ^{elektronik} [team@laifentech.com](mailto:kcs@laifentech.com)'de. Takdir
Yorumlarınız çok fazla ve bunu yapabilmeyi umuyoruz Yardım.

Ürün

1. ilk 60° salınımları & 66.000 Titreşim Tamamen yeni bir temizleme sistemi. Somunlar Wave, ultra geniş 60° salınımları birleştirir ile dakikada 66.000'e kadar titreşim ısıtılı bir gülümseme.
2. Yüksek Kaliteli Fırça Başlıkları Fırça Başlıkları ısrar etmek yumuşak TPU malzemeden yapılmıştır ve nazik dişlere ve diş etlerine. Üç Farklı türler size yardımcı olmaya hazır
Temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için.
3. Özelleştirilebilir Uygulama Kontrolü: Laifen Uygulaması ^{Summaktadı} Bir fırça için 2.000 fırça ayarı kişiselleştirilmiş bakım. 2 dakikalık zamanlayıcı ^{Sağ} ^{lar} diş hekiminin tavsiye ettiği fırçalama süresi için ve

30 saniyelik bir hatırlatıcı (uydurma) tüm kapsamlı temizliğe yardımcı olur Bölge.

4. 45 gün pil ömrü Hızlı Manyetik Şarj cihazı Laifen Wave'i yalnızca 2.5 dakikada şarj eder saat ve 45 saate kadar sürer Gün tek bir şarjla. Kaygısız fırçalama garantilidir.
5. Dikişsiz tasarım, artık kir yok. O Dikişsiz Laifen Wave'in tasarımı boşluk bırakmıyor kir ve döküntü için, böylece Temizlemesadece kısa bir durulama gerektirir.
6. Teslimat kapsamı Laifen Wave dış fırçası sapı, Üç fırça başlıkları, manyetik şarj kablosu, Kullanım kılavuzu, 12 ay sorunsuz Garantive güler yüzlü müşteri hizmetleri.
7. Not: Dış fırçasının önce ilk kullanım. İçinde Kural olarak, gösterge 5-10'dan sonra yanar Tutanak şarj süresi ve dış fırçası yakl. 2-2,5 saat tam şarjlı (görüntülenir) içindensürekli yeşil ışık).

Avantaj -ları:

1. Çift Etkili Salınım Titreşimi Ultra Geniş Titreşim ve güçlü titreşimler, kapsamlı Dış ve dış etlerinin temizliği 60° Titreşim 66.000 titreşim/dak Nazik

Dışlar

2. Birinci sınıf fırça başlıkları. Uygun fiyat Fırça 90 güne kadar sürer.
3. Hızlı şarj ve uzun ömürlü pil 45 gün Pil* Tam bir 2.5 saat Ücret
4. Akıllı Fırçalama Uygulaması
5. Özelleştirilebilir modlar: 2.000'e kadar mümkün Fırçalama ayarları Otomatik mod kaydetme. Modu olmakGerçek zamanlı olarak rahatça saklanır

laifen Wave Elektrikli Diş Fırçası

İçerik

- Önemli Güvenlik İpuçları
- Mevzuata Uygunluk Bilgileri
- Paket İçeriği ve Özellikleri ürün
- Doğru fırça başlığını seçme
- Fırçalama deneyiminize başlayın
- Uygulamaya giriş yapın
- Yükleme Bilgileri
- Sorun giderme
- Aşırı ısınma
- İmha ve geri dönüşüm bilgileri
- Pil İmha Bilgileri
- İade Politikası
- Garanti ve destek
- Ürün Özellikleri
- Fayda -ları
- Önemli Güvenlik İpuçları

TEHLİKE

1. Cihazı veya pili maruz bırakmayın.
2. Kısa devre riskine dikkat edin.
Bir cihazın terminallerine dokunun geçerli.
3. Piller sızdırsa durun
mevzuata uygun olarak kaçmak ve
Sızıntı yapan pilleri atmayın.

Sıcaklığaşın yüksek.
Kutunesneler

Desteklenmemektedir bir pil veya başka bir kaynak ile

hemen cihazı kullanmak için. Pilleri atın
Yönerge -leri yerel çevre sorunları. Değil
çöp Ev kadınları.

4. Şarj bileşenlerini Su. önemli bir ortamda veya
5. Sıvı varsa cihazı şarj etmeyin. hediyeşarj portunda.
6. Dış fırçalarına güç verilmesi gerekir sadeceçok düşük bir güvenlik voltajında cihazın işareti ne karşılık gelir.

⚠ UYARI

1. Bu cihaz uyumlu olmayan piller içeriyor Değiştirilebilir. Pil ömrünün sonuna geldiğinde ömrü, lütfen takip edin
2. Verimli şarj edilmesini sağlamak için pil Cihazı bir 0 °C ile 30 °C arasında. Kaçınacak sınırları böyleeksik veya yetersiz ücretler.
3. Güç kaynağını düzenli olarak kontrol edin için Hasar olup olmadığını kontrol edin. Durumunda Cihazı kullanmak için ve gecikmeden değiştirin.
4. Ürün hasarlı görünüyorsa, belirli fırça sapı veya başlığı, durdur kullanın.
5. Bunu değiştirmeye veya onarmaya çalışmayın ürün kendi başınıza.
6. Bu ürünü tiner ile temizlemeyin, bazı çözücüler veya kimyasal maddeler.
7. Bu ürünü bir su içinde kullanmayın. derinlik 1 metreden fazla 30 dakika.

⚠ DİKKAT

1. Bu ürünü ilk kez kullanırken, Biraz rahatsızlık hissedebilirsiniz veya diş etlerinde küçük bir kanama, Saat diş etlerinizin bu yöntemle alışması Temizleme. Size tavsiye ederiz başlamak mod 1'e göre. Genel olarak, duyumlar ilk rahatsızlık 1 ila 12 haftalar, ancak 2'den fazla devam ederlerse haftalar, cihazı kullanmayı bırakın ve Görmek diş hekiminiz.
2. Bu ürün standartlarına uygundur.güvenlik elektromanyetik cihazlarla ilgili. Kalp pilleri hakkında herhangi bir sorunuz için Kalpveya diğer implante edilmiş cihazlar, lütfen bir doktora danışın veya aygıt kullanmadan önce implante edilir.
3. Bu ürün aşağıdakiler için tasarlanmıştır Temizlemedişler, diş etleri ve dil. Değil başka bir amaçla kullanmayın.
4. Geri yüklemeleri olan kullanıcılar Diş ortodontik aapareyler veya

Dış implantlarının avukat Bu ürünü kullanmadan önce bir diş hekimine başvurun. Durumunda önemli kanama, rahatsızlık, Ağrı veya diğer tıbbi durumlar, bir diş hekimi veya doktor.

5. Bu cihaz kullanım için tasarlanmamıştır ————— kişiler (çocuklar dahil) güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda denetlenmedikçe veya bilgilendirilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekler bozulur veya deneyim ve bilgiden yoksundur. Cihazla oynamadıkları kılardan emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
6. Fırça başlıklarını başkalarıyla paylaşmayın.
7. Fırça başlığını her üç ayda bir değiştirmenizi öneririz. Fırça başlığı hasar görmüş veya deforme olmuşsa hemen değiştirin.
8. Bu ürün yalnızca Laifen elektrikli diş fırçaları için tasarlanmış fırça başlıklarıyla uyumludur. Resmi olmayan diş fırçası başlıklarının kullanılması sonuları için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Uyumluluk Bilgileri Düzenleyici

FCC Uyarısı

Bu cihaz, 15. bölüme uygundur. bu FCC. Çalışması her ikisine de tabidir

Aşağıdaki koşullar:

- (1) Bu cihaz ^{Eldivenleri çıkar} girişim ve
- (2) Bu cihaz herhangi bir paraziti kabul etmelidir Alınan olabilecek parazit dahil istenmeyen çalışmaya neden olur. Tüm değiştirmek veya açıka yapılmayan değışiklikler sorumlu taraa onaylanmıştır. Uyma kullanıcının kullanım hakkını iptal edebilir ekipman.

Not: Bu ekipman test edilmiştir ve Uyumlu Beyan Edildi dijital bir cihazın sınırlarına kadar B Sınıfı, Bölüm 15 uyarınca âdet FCC'nin. Bu sınırlar saėlamak için tasarlanmıştır Karşı makul koruma Girişim bir konut kurulumundaki zararlılar. Bu ekipman üretir, kullanır ve yayabilir Enerji radyo frekansı ve kurulu değilse ve talimatlara uygun olarak kullanıldığında, ^{Eldivenleri çıkar} zararlı girişim radyo iletişimi. Ancak şöyle bir şey yoktur: Hayır parazit oluşmamasını garanti eder belirli bir tesiste üretim yapmayacaktır. Bu ekipman parazite neden olur radyo veya televizyon alımına zararlıdır.

Kutu açılıp kapatılarak algılanabilir ekipman, kullanıcıya tavsiye ederiz Denemek bu parazitleri düzeltmek için

Aşağıdaki eylemlerden birini veya birkaçını gerçekleştirmek: - Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.

Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
Cihazı bir elektrik prizine takın

Bulmaüzlerinde bulunandan farklı bir devrede
Alıcı prize takılı.

* Bayi veya teknisyene danışın radyo/TV yardım almak için.

Cihaz, gereksinimleri karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Gereksinim -leri maruz kalma hakkında genel bilgiler

Radyo frekansı: Cihaz, taşınabilir maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.
IC Uyarısı

Bu cihaz standartlara uygundur muafiyet Industry Canada RSS lisansı. Ses Çalıştırma her iki koşula da tabidir Ertesi:

- (1) Bu cihaz neden olmamalıdır. girişim ve
- (2) bu cihaz herhangi bir paraziti kabul etmelidir, neden olabilecek girişim istenmeyen çalışmaya neden olur cihaz. Cihaz, gereksinimleri karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Maruz kalma için genel gereklilikler Radyo frekansı. Bu cihaz şu durumlarda kullanılabilir: olmadan taşınabilir maruz kalma koşulları kısıtlama.

Bu cihaz RSS ile uyumludur Endüstri Kanada için geçerlidir lisanstan muaf radyo cihazı. Çiftlik ^{Doğu} Her ikisine de yetkili Aşağıdaki koşullar:

- (1) cihaz parazite neden olmayacaktır, ve
- (2) Cihazın kullanıcısı herhangi bir Sıkışma Parazit olsa bile radyo frekansı parazit tehlikeye atması muhtemeldir. işlem.

Cihaz, gereksinimleri karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Gereksinim -leri RF'ye maruz kalma standartları.

Cihaz, taşınabilir maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

Ürün Özellikleri Adı

Ürün Adı: Wave Elektrikli Diş Fırçası

Modeli: LFTB01-S / LFTB01-A / LFTB01-P

Çalışma gerilimi: 7.6V

Çalışma gücü: 6W

Şarj Girişi: 5V 1A

Pil Kapasitesi: 900mAh

Şarj süresi: 2,5 saat~

Kod IP : IPX7



Doğru fırça başlığını seçme

Diş Eti Bakımı (CS) Ulaşan yumuşak, ultra ince kıllar temizlik için dişler arası boşluklar diş etlerini ve dişleri çok nazikçe temizler.

Arayan insanlar için uygundur.

Nazik günlük fırçalama.

Süper Temiz (GS)

Uyum sağlayan C şekilli kıl tasarımı diş yüzeyleri ve kapsamlı bir Temizlik, leke kalmamasını sağlar Özlü -yor. Sahip olan kişiler için uygundur verimli diş fırçalama dişleri beyazlatır ve temizler.

Ultra Beyazlatma (ABD) W şeklinde kıl tasarımı parlatma alanı ve için daha parlak bir gülümseme. İçin uygun yüksek performansa sahip insanlar Dişleri beyazlatmak için temizlik suchen.

Başlatın Fırçalama

1. Fırça başlıklarının takılması ve değiştirilmesi

Eklenti: Fırça kafasının kollarını hizalayın
Fırça kafasını motor miline bastırın
iki parça arasında hafif boşluk (bir boşluk < aparatın).

ile diş fırçası sapının önü.

içinsapa takın, bir

1 düzgün çalışması için mm gereklidir

Değiştirme: Diş fırçasını şu şekilde tutun:

çıkarmak için yukarı doğru. Ardından

2. Gücü açma/kapama ve

değiştirmek moda

Güç düğmesine bir kez basın

için cihazı açın/duraklatın ve

arasında geçiş yapmak için iki kez dokunun

diğeri :

① Mod 1: İlk kullanımlar için uygundur ve

bu hassas dişlere sahip kullanıcılar.

② Mod 2: Günlük kullanıma uygundur ve

kullanıcılara

Mükemmel sonuçlar aramak

Temizleme.

③ Mod 3: Aşağıdaki kullanıcılar için uygundur: İstemek

plağı çıkarın ve güçlü

beyazlatma.

Çalışma sırasında basit bir basış Sağlar fırçalamayı duraklatmak için. Eğer öyleyse 10 saniye durakladı, fırça dişler Uyku moduna geçer.



Diğer akıllı özellikler

Akıllı Yeniden Etkinleştirme: Fırçayı kaldırın. dişler bir süre sonra yeniden etkinleştirmek için dik konumda kırmak. Güç ve Mod LED'leri yanacaktır. Fırçalama Zamanlayıcıları: 2 dakika sonra kullanım, diş fırçası titrer ve geçer Otomatik olarak bekleme modunda (zamanlayıcı mola verildiğinde durmaz, ancak Sıfırlar uyku moduna girdikten sonra). Zamanlayıcı

1 ile 5 dakika arasında ayarlanabilir/uygulama, "Fön Süresi" bölümünde fırçalama); 30 saniyelik hatırlatma Aktif Uygulamada diş fırçası titreyecek

Davet etmek için her 30 saniyede iki kez Kullanıcı fırçalama alanını değiştirmek için. Moda uçak: Uçağın modundan bağımsız olarak, bir destek2 saniye uzunluğunda düğme uçak moduna geçmenizi sağlar; Bir 2 saniyelik uzun basma, uçak modu. QR Kodunu Tarayın Uygulama Girişi ile indirmek için cep telefonunuza ve Uygulamayı mağazanızdan yükleyin Uygulama. Zaten indirdiyseniz uygulaması için Son sürümünü kullanarak kaydolun Adres e-postası.

LED Durumlarının Yüzdesi: %100-%50 %50-%20 %20-%10 %10-%1 Durum Göstergesi: Sabit Yeşil Işık Sabit Sarı Işık Sabit Kırmızı Işık Yanıp Sönen Kırmızı Işık.

Güç Tüketimi : 0% Durum göstergesi : Motor artık titremeyene kadar her 0.5 saniyede bir yanıp sönen kırmızı ışık.

Yükleme Bilgileri

Diş fırçasını kullanmanız gerekebilir kutu. Lütfen şarj ederken dikkat edin

1. Diş fırçasının altını bağlayın

Hasarı önlemek için güç kullanmayın

2. Manyetik şarj kablosunu bağlayın

yük onları ilk kez kullanmadan önce Ertesi :

hakkıylamanyetik şarj kablosu ile.

Hasarı kaçınmak.

Bir USB-C güç adaptörü ve

100-240 V, 50-60 Hz'lik elektrik prize. bu yükleme göstergeleri ve ilgili Pili seviyeleri aşağıdaki gibidir:

Pil Tüketimi : 100% 99%-0% Basınç : Motor artık titremeyene kadar her 0.5 saniyede bir yanıp sönen kırmızı ışık.

3. Bu ürün bir güç adaptörü, bu satın alınmalıdır
Aynı ayrı. Güvenlik nedeniyle elektrikliPili şarj etmekten kaçının
Salon gibi nemli ortamlar in hamam.
İmhasına ilişkin bilgiler Pili

Laifen Elektrikli diş fırçası şunları içerir: Lityum iyon piller. Genel olarak,

Bu pillerin hizmet ömrü ve çalışma süresi, duruma bağlı olarak Kullanmak.Bu nedenle, bunları uzun süre kullanmaktan kaçının.

boşaltma veya kullanılmadan bırakma zamanı. Uyarı: Pilleri açmayın veya zarar vermeyin ve onları iletken malzemelere maruz bırakmayın (metal), Nem, sıvılar, ateş veya ısı
Kaynak. Aksi takdirde piller akabilir ya da patlar, bu da yaralanmalara neden olabilir.
Dahili piller maddeler içerir hangi çevre ve buna uygun olarak
ülkenizin veya bölgenizin yasaları Genişletilmiş düzgün olduklarından emin olmak için
geri dönüşüme dönüştürmek Profesyonel rehberliğe ihtiyacınız varsa Hedef. pilleri çıkarın veya

Piller çıkarılamaz, uygulayın Laifen doğrudan Laifen'e veya halka elektrikli diş fırçası

Geril dönüşüm alanı.



Pil çıkarma adımları:

- Diş fırçasının olmadığından emin olun Laifen yükleme.
- Diş fırçasının olduğundan emin olun Laifen söndürmek.
- Cihazın alt kapağını açın dişler elektrikli.
- Kullanarak bağlantı kablolarını ayırın Araçları izole.

e. Kasanın yan tokalarına bastırın için Düzeneği çıkarın, ardından pili çıkarın.

* Pili çıkardıktan sonra şunlardan emin olun dış fırçası bir güç kaynağı.

İade Politikası İade Hizmetleri 30 yaş altı Gün

30 günlük iade hizmeti sunmaktadır. Sahip olduğunuz Tarihinden itibaren 30 gün satın alma tarihi ile iletişime geçmek için Temsilci E-posta ile müşteri hizmetleri csteam@laifentech.com adresini seçin ve prosedür Geri.

Para iadesine hak kazanabilmek için, sen gerekir: Ürünü tüm Aksesuarlar ve hediyeler dahildir. Tüm bunları iade edin Ög orijinal ambalajında. Bir Geçerli satın alma belgesi. Şunlardan emin olun: ürün ve aksesuarları yeniden satılabilecek durumdadır.

İade Nakliyesi: İadeler için nakliye masrafları -----Ürün kalitesi sorunları olacaktır Laifen tarafından desteklenmektedir. Herhangi bir iade sebep Ürünün kalitesi dışında Müşterinin sorumluluğu ve ilgili tüm masraflar da Ücretler dahil ürünün iadesi müşteri tarafından halledilecektir.

Garanti ve destek

Laifen Bir ano'nun sınırlı garantisi.

Laifen bir yıllık sınırlı garanti sunar Kapsar hem elektrikli diş fırçası hem de Orijinal manyetik şarj kablosu. Eğer da satın alma tarihinden sonraki yıl, ürün düzgün çalışmadığında Bir nedenimalzeme veya işçilik kusuru, biz Tamir etmeye veya değiştirmeye kararlıyız. LütfenStoklara bağlı olarak mevcutsa, bir aygıt farklı bir renkte değiştirme veya eşdeğer bir model.

Garanti kapsamında olmayan

ürünler: * Fırça başlıkları.

Yetkisiz satıcılardan yapılan satın almalar.

Garanti süresi dolmuş ürünler.

- * Geçerli satın alma belgesi olmayan ürünler.
- * Değiştirilmiş, değiştirilmiş veya Tamir gayri resmi yollarla.

• * Fırçalama amacı dışında kullanılan ürünler bazıdışler.

Operasyonlardan kaynaklanan hasarlarSaygı Laifen kullanım kılavuzu değil.

- * Yoksulların neden olduğu hasar use veyaBir kaza.
- * Aşın kullanımdan kaynaklanan hasarlar Karşılık gelebilir Normal kullanım.
- * Kullanımından kaynaklanan hasar fırçaLaifen dışındaki markalar.

Profesyonel destek alın **laifon**

Ürünlerimiz hakkında başka sorularınız varsa siyaset Ürünlerimizin garantisi veya kullanımı, Bizimle posta yoluyla iletişime geçmekten çekinmeyin elektronik csteam@laifentech.com'de. Biz Geri bildiriminizi çok takdir ediyorum ve ar size yardım etmeye istekli.

laifen Wave Elektrikli Diş Fırçası

0

İçeriği

Önemli güvenlik ipuçları
Mevzuata uygunluk bilgileri
Paket İçeriği ve Özellikleri ürün
Doğru fırça başlığını seçme
Fırçalama deneyiminize başlayın
Uygulamaya Bağlama
Şarj Bilgileri
Sorun giderme
Aşırı ısınma
İmha ve geri dönüşüm bilgileri
Pil İmha Bilgileri
Malların iadesi
Garanti ve Destek

Önemli güvenlik ipuçları

Önemli güvenlik ipuçları

⚠ TEHLİKE

1. Cihazı veya pili sıcaklıklara maruz bırakma aşırı yüksek.
2. Kısa devre tehlikesinin farkında olun Neden terminallere dokunan metal nesneler tarafından pille çalışan cihazlar veya Besleme.
3. Pil sızıntısı fark ederseniz, durun hemen kullanmak. Pilleri atın
Yasalara ve yönergelere uygun olarak bağışlamarehberbölgenizde çevre koruma. Atmayın
Normal atıklarla birlikte sızıntı yapan piller Evcil.

4. Bileşenleri şarj için bırakmayın bu Nemli veya yakın bir ortamda üretilir suya.

5. Sıvı varken şarj etmeyin İçindeşarj portu.

6. Diş fırçaları yalnızca cihaz üzerinde işaretleme.

Alçak

İlgili
gerilimi

güvenlik



UYARI

1. Bu cihaz değiştirilemeyen piller içerir.
Talimat -ları.

Pil ömrü tamamlandığında

2. Etkin şarjı sağlamak için pil

Cihazı

0°C ve 30°C, aşağıdaki durumlardan tam olarak şarj edilemiyor veya kaçınmak için pil tehlikeye atılabilir.

3. Güç ünitesini düzenli olarak kontrol edin.

doğrulamakherhangi bir hasarın varlığı. Eğer sen

Hasarı bul, durdur heme

hemen kullanın ve değiştirin.

4. Ürün hasarlı görünüyorsa, belirli

sap veya fırça başlığı, kullanmayı bırakın.

5. Bunu değiştirmeye veya onarmaya çalışmayın ürünüyalnız.

6. Bu ürünü tiner ile temizlemeyin. Boya çözücüler veya kimyasallar.

7. 1'den daha derin suda kullanmayınız. Metro 30 dakikadan fazla.



DİKKAT

1. Bu ürünü ilk kez kullandığınızda Saat Hafif bir rahatsızlık veya olduğu gibi hafif diş eti kanaması gerekli diş etlerinin buna alışması
temizleme yöntemi. Şununla başlamanızı öneririz: buMod 1. Başlangıçtaki herhangi bir rahatsızlık azalır genellikle 1-2 hafta içinde, ancak ^{Devam ederse} 2 haftadan sonra kullanmayı bırakın ve Diş hekiminize danışın.

2. Bu ürün standartlarına uygundu emniyet elektromanyetik cihazlar için. İçin

Kalp pilleri veya diğerleri hakkında herhangi bir endişe Aygıtları implantlar, doktorunuza danışın veya kullanmadan önce uzman.

3. Bu ürün tasarlanmıştır münhasıran dişleri, diş etlerini ve dili temizlemek için. Değil başka bir amaç için kullanmayın.

4. Diş restorasyonları olan kullanıcılar, örneğin Aygıtları ortodonti veya diş implantları, mutlaka kullanılmalıdır Bu ürün bir diş hekiminin rehberliğinde. ¹²belirgin kanama, rahatsızlık, ağrı durumu veya diğer tıbbi sorunlar, dişçi doktorunuz.
5. Bu cihaz kullanım için tasarlanmamıştır Kenara azalmış kişilerin (çocuklar dahil) fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip veya yoksun olmak deneyim ve bilgi, ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmemiştir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
6. Fırça başlıklarını başkalarıyla paylaşmayın.
7. Fırça başlığının her üç ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Fırça başlığı hasar görmüş veya deforme olmuşsa hemen değiştirin.
8. Bu ürün yalnızca elektrikli diş fırçası başlıklarıyla uyumludur Resmi olmayan bir ürün kullanmanın sonuçlarından sorumlu değiliz.

Mevzuata uygunluk bilgileri

FCC Uyarısı

Bu cihaz, 15. bölüm ile uyumludur.kurallar FCC. Operasyon şunlara tabidir:

İki koşul:

- (1) Bu cihaz neden olamaz Girişim zararlı ve
- (2) alınan herhangi bir müdahaleyi kabul etmelidir, Dahil neden olabilecek olanlar istenmeyen işlem. Herhangi bir değişiklik tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler Uyum tarafı olabilir ekipman. Örneğinkullanıcının kullanma izni

Not: Bu ekipman test edilmiştir ve

B Sınıfı dijital cihaz, Bölüm 15 uyarınca
parazite karşı makul koruma
Ekipman üretir, kullanır ve yayabilir

Bu
bir cihazın sınırlarına uygun olduğu tespit edildi
kurallar FCC. Bu sınırlar sağlamak için tasarlanmıştır
Zararlıbir konut kurulumunda. Bu
enerji ve kurulu değilse ve

talimatlara uygun olarak kullanıldığında, neden olabilir Girişim radyo iletişimine zararlıdır. Fakat

Bunların gerçekleşmeyeceği garanti edilemez Girişim belirli bir kurulumda. Eğer

Bu ekipman ,Aygıtları radyo ve televizyon yayınlarının kapatılması ve

Ekipmanı tekrar açarken, kullanıcı aramak "atıpık" girişimi düzeltmek için

Aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını alarak:

Anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.

Ekipmanve alıcı arasındaki mesafeyi artırın. *

Cihazı bir prize bağlayın. Devre alıcının bağlı olduğundan farklı.

* Bayiye veya bir radyo/TV teknisyenine danışın uzman yardım için.

Cihaz, gereksinimleri karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Gereksinim -leri radyo frekanslarına genel maruz kalma.

Cihaz aşağıdaki koşullarda kullanılabilir: sergi sınırlama olmaksızın.

IC Uyarısı

Bu cihaz RSS muafiyeti ile uyumludur lisans Industry Canada'nın. Operasyon aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) cihaz parazite neden olamaz ve

(2) Cihaz herhangi birini kabul etmemelidir. Girişim neden olabilecekler de dahil olmak üzere cihazın istenmeyen çalışması.

Cihaz, gereksinimleri karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Gereksinim -leri radyo frekanslarına genel maruz kalma.

Cihaz olmadan kullanılabilir. Sınırlama taşınabilir maruz kalma koşulları altında.

Bu ekipman aşağıdakilere uygundur: RSS'nin Industry Canada'nın aşağıdakiler için geçerlidir: lisanstan muaf radyo ekipmanı. Operasyon aşağıdaki iki koşula tabi olarak yetkilendirilmiştir:

(1) Bu cihaz neden olamaz Girişimve

(2) Bu cihazın kullanıcısı kabul etmemelidir Hangisi alınan girişim dahil olmak üzere girişim istenmeyen çalışmaya neden olabilir.

Cihaz, aşağıdakilerle uyumlu olarak değerlendirilmiştir: Genel Gereksinimler radyo frekanslarına maruz kalma.

Cihaz olmadan kullanılabilir Sınırlama taşınabilir maruz kalma koşulları altında.

Paket İeriđi ve zellikleri

rn zellikleri rn Adı :

Dalga elektrikli diř fırası modeli: LFTB01-S/LFTB01-A/LFTB01-P

alıřma Gerilimi : 7.6V

alıřma gc : 6W

IP Kodu : IPX7



Şarj Girişi : Pil Kapasitesi 5V1A
900mAh şarj süresi: 2,5 saat~



Doğru fırça başlığını seçme

Dış Eti Bakımı (CS) İçeri
ulaşan ultra yumuşak kıllar diş
aralıklarının derinliği,
Hem diş etleri hem de diş etleri için nazik
temizlik dişler. Deneyim arayanlar için uygun
Günlük fırçalama için nazik.



C şeklindeki kılların tasarımı Süper Temiz (GS)
diş yüzeylerine uyum sağlayarak hiçbir şeyi
dışarıda bırakmayan kapsamlı bir temizlik nokta.
Fırçalama arayanlar için uygundur dişleri
beyazlatan ve temizleyen. Tasarım Alanı artıran
W şeklinde kıllar daha parlak bir gülümseme için.
Temiz bir temizlik arayanlar için uygundur. dişleri
beyazlatmak için güçlüdür.

Fırçalama deneyiminize başlayın

1. Kafaların takılması ve değiştirilmesi

Montaj: Fırça kafasının kıllarını fırça başlığıyla hizalayın. kısım diş
fırçası sapının önü. Ödülleri

motor milinin başını aşağı indirin eklemek için olduğundan emin olarak iki parça arasında hafif bir boşluk (işlem < 1 mm) boşluk gereklidir.

Değiştirme: Kolu tutun ve itin Ince Fırçayı çıkarmak için yukarı doğru hareket ettirin. Bu yüzden Yeni fırça başlığını takın.

2. Gücü açın/kapatın ve arasında geçiş yapın Modalite diğerine

Güç düğmesine bir kez basın. Işık/ duraklatın ve iki kez basın.

Modu değiştir :

- ① Modu 1: İlk kullanım için uygundur ve Kullanicı hassas dişlerle.
- ② Modalite 2: Günlük kullanım için uygundur ve bu mükemmel temizlik sonuçları arayan kullanıcılar.
- ③ Modları 3: Arayan kullanıcılar için uygundur Kaldırma plak koruması ve güçlü beyazlatma. Çalışma sırasında tek bir basış Koyar fırçalama duraklatıldı. Eğer içeride kalırsan Modalite Duraklat

10 saniye duraklayın, diş fırçası girer



Diğer akıllı özellikler

Akıllı Çalar Saat: Diş fırçanızı elinize alın konum vertical'ı kullanarak Duraklatma modundan çıkarın.

Güç ve mod göstergeleri aydınlatacaktır.

Fırçalama zamanlayıcısı: 2 dakika sonra Kullanımı Diş fırçası titrer ve otomatik olarak girer

Duraklatma modunda (zamanlayıcı etkilenmez ^{Kaynak} duraklatır, ancak girdikten sonra sıfırlanır Duraklatma modu). Bu zamanlayıcı olabilir ^{Düzenlen} mi? Süre altında uygulamada 1 ila 5 dakika Fırçalama; Uygulamada 10'lu Hatırlatma 30'lu yaşlarda, diş fırçası her seferinde iki kez titreşir Alanını değiştirmeyi istemek için 30 saniye Fırçalama.

Uçak Modu: Herhangi bir durumda, uzun basın bu girmek için 2 saniye açın Uçak modunda; 2 saniye boyunca uzun basın için Uçak modundan çıkın.

Uygulamaya bağlanma

QR kodunu cep telefonunuzla tarayın.
Uygulamayı indirdikten sonra, bunun
E-posta.

Kaldırma ve Uygulamayı uygulama mağazanızdan yükleyin. Eğer varsa
Sürüm ve

Pil Yüzdesi: %100-%50 %50-%20 %20-%10 %10-%1 Gösterge Durumu: Sabit Yeşil Işık Sabit Sarı Işık Sabit Kırmızı Işık Yanıp Sönen Kırmızı Işık

Pil Yüzdesi : %0Gösterge Durumu:Sabit Yeşil Işık Sabit Sarı Işık Sabit Kırmızı Işık Yanıp Sönen Kırmızı Işık

Şarj Bilgileri

Şarj etmeniz gerekebilir Önce diş fırçası ilk kez kullanmak için. Not

Şarj olurken aşağıdakiler:

1. Cihazın alt kısmını düzgün şekilde bağlayın. diş fırçası manyetik şarj kablosu ile. Kaçınmak zarar vermemek için güç kullanımı.
2. Manyetik şarj kablосunu bir 100-240V, 50-60Hz AC güç çıkışı. Bağdaştırıcı ve bir bu şarj göstergeleri ve ilgili seviyeler pil aşağıdaki gibidir:

Pil Yüzdesi: %100 %99-%0 Gösterge Durumu: Sabit Yeşil Işık Yanıp Sönen Yeşil Işık

Bu ürün bir
Ayrı ayrı. Güvenliği sağlamak için
İmhasına ilişkin bilgiler

Beslemesatın alınması gereken
Elektrikli Banyo gibi nemli ortamlarda şarj etmekten kaçının.
Şarjlı lityum iyon. Genel olarak, beklenti

Laifen Elektrikli diş fırçası pil içerir
Ömür ve pil ömrü göre değişir
o uzun süre kullanılmamış.

kullanın, bu yüzden onları boş bırakmaktan kaçınmak iyidir

Dikkat: Cihazı açmayın, zarar vermeyin veya açığa çıkarmayın. pil a malzemeler (metaller), nem, sıvılar, ateş veya ısı kaynakları. Yoksa bu piller akabilir veya patlayabilir. sonuç olarak kişisel yaralanma. Pil Şarjlı dahil edilen maddeler içerir çevreye potansiyel olarak zararlı ve yapabilirler uygun sökme talebinde bulunun aklama, ülkenizde yürürlükte olan yasalara uygun olarak Ülke veya bölge. Profesyonel bir rehber için pillerin çıkarılması veya mümkün değilse Kaldırmak doğrudan Laifen'e danışın veya getirin Geri dönüşüm merkezinde elektrikli diş fırçası Belirlenen.



Pil çıkarma adımları:

- Diş fırçasının şarj olmadığından emin olun.
- Diş fırçasının kapalı olduğundan emin olun.
- Diş fırçasının alt kapağını açın elektrikli.
- Kullanarak bağlantı kablolarını ayırın Aletleri Blok.
- Yan gövde kapaklarına kaldırmak tamamını ve ardından pili çıkarın.

* Pili çıkardıktan sonra, diş fırçası bir kaynağa bağlı değil Besleme.

Malların iadesi lade hizmeti 30 Gün.

Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde şunları yapabilirsiniz: temas Hizmetimizin bir temsilcisi Müşteriler indirizzocsteam@laifen'e e-posta ile tech.com İade prosedürünü başlatmak için.

Para iadesine hak kazanmak için şunları yapmalısınız:

Ürünü tüm aksesuarları ile birlikte iade edin ve HediyeDahil. Onları orijinal ambalajlarında iade edin.

- Geçerli bir satın alma belgesi sağlayın. Güvenli kim Ürün ve aksesuarlar tekrar kullanılabilir. İade nakliye masrafları:

- II kalite sorunlarından kaynaklanan iadeler ürün kargo masrafları karşılanacaktır. Laifen.

Kalite dışında herhangi bir nedenle iade Ürün İncelemesi müşterinin ve tüm ürünün iadesiyle ilgili maliyetler, Dahil kargo masrafları tarafından karşılanacaktır. müşteri.

Laifen Garanti & Destek 1 yıllık sınırlı garanti

Laifen her ikisi de 1 yıllık sınırlı garanti sunar için elektrikli diş fırçası ve şarj kablosu için orijinal manyetik. tarihinden itibaren bir yıl içinde satın alma Ürün düzgün çalışmıyorsa malzeme veya işçilik kusurlarından dolayı, Sağlamak onarım veya değiştirme hizmetleri. Da stok durumuna bağlı olarak, ünite Yedek farklı bir renk olabilir veya eşdeğer bir model olabilir.

Garanti kapsamında olmayanlar:

- Kafa.
- Yetkisiz satıcılardan satın almılar.

Ürünler artık garanti kapsamında değildir.

Geçerli satın alma belgesi olmayan ürünler.

- Değiştirilmiş, değiştirilmiş veya Tamir Gayri resmi

Diş fırçalama amacı dışında kullanılan ürünler* . * *

Kurallara uygun olmayan işlemlerden kaynaklanan hasarlar El ile Laifen kullanıcısı.

Yanlış kullanım veya kazalardan kaynaklanan hasarlar.

- Aşın kullanımdan kaynaklanan hasarlar bu normal aşınma ve yıpranma.
- Laifen olmayan fırça başlıklarının kullanımından kaynaklanan hasarlar.

Profesyonel yardım alın **Laifen**

Bizimle ilgili başka sorularınız varsa siyaset ürünün garantisi veya kullanımı, değil tereddüt etmek Bize e-posta ile ulaşın csteam@laifentech.com. Geri bildiriminizi gerçekten takdir ediyoruz ve Vediamo Size yardım etmek için sabırsızlanıyorum.

laifen Wave Elektrikli Diş Fırçası

İçerik

Önemli Güvenlik İpuçları

Mevzuata Uygunluk Bilgileri

Paket İçeriği ve Özellikleri ürün

Doğru fırça başlığını seçme

Fırçalama Deneyiminize Başlamak

Uygulamaya başlama

Yükleme Bilgileri

Sorun giderme

Aşırı ısınma

İmha ve geri dönüşüm bilgileri

Pil İmha Bilgileri

İade Politikası

Garanti ve Destek

Önemli Güvenlik İpuçları

Önemli güvenlik ipuçları

⚠ TEHLİKE

1. Cihazı veya pili sıcaklığa maruz bırakmayın aşırı yüksek.
2. Kısa devre riskinin farkında olun Neden ile temas halinde olan metal nesneler tarafından tarafından desteklenen cihazların terminalleri Pilo güç kaynakları.
3. Pil sızıntısı tespit ederseniz durun Kullan ürünü hemen. Atın yasalara uygun olarak akan piller ve Yönerge -leri yerel çevresel faktörler. Atmayın Normal atıklı sızıntı yapan piller ev.
4. Bunun şarj bileşenlerini koymayın. ürünnemli bir ortamda veya suda.

5. Sıvı varken ürünü yüklemeyin hediye yükleme limanında.
 6. Diş fırçaları sadece şarj edilmelidir cihaz ile ekstra düşük güvenlik voltajı üzerindeki işarete karşılık gelir.



UYARI

1. Bu cihaz değiştiremeyen piller içerir. Pili ömrü sona erdiğinde,
 Geri dönüşüm talimatlarını takip edin. atmak cihazı doğru şekilde kullanın.
 2. Etkin şarjı sağlamak için Pili cihazı 0°C arasındaki bir ortamda şarj edin
 y 30°C'nin olduğu durumlardan kaçınmak için pil tam olarak şarj edilemiyor veya yük verimliliği tehlikeye girer.
 3. Düzenli olarak kontrol edin Besleme herhangi bir zarar görmesi durumunda. Herhangi bir tespit ederseniz hasar verirse, kullanmayı hemen bırakın ve Değiştirmek için.
 4. Ürün hasarlı görünüyorsa, özellikle tutamak veya fırça başlığı, durdur Kullanmak.
 5. Bu ürünü değiştirmeye veya onarmaya çalışmayın. ~~---~~ hesabınız.
 6. Bu ürünü tinerlerle temizlemeyin resim Çözücüler veya kimyasallar.
 7. 1 metreden fazla suda kullanmayın. derinlik 30 dakikadan fazla.



DIKKAT

1. Bu ürünü ilk kez kullanırken, mümkün hafif rahatsızlık hisseden veya diş etlerinden hafif kanama, çünkü Dişeti Bu yöntemle alışmak zorundayım
 Temizleme. ile başlamanızı öneririz Yol1. Genellikle herhangi bir başlangıç rahatsızlığı 1-2 hafta içinde kaybolur, ancak devam ederse daha Bu 2 haftanın ötesinde, Kullanmayı bırakın ve bir diş hekimine danışın.
 2. Bu ürün standartlarına uygundur. Emniyet elektromanyetik cihazlar için. Eğer varsa kalp pili ile ilgili herhangi bir sorunuz veya Diğer implante edilmiş cihazlar, bir doktor veya cihaz sağlayıcısı Dağıtılan kullanmadan önce.
 3. Bu ürün yalnızca aşağıdakiler için tasarlanmıştır: temiz dişler, diş etleri ve dil. Öyle değil Başka bir amaç için kullanmayın.

4. Diş restorasyonu yaptıran kullanıcılar, nasıl diş telleri veya diş implantları, bu ürünü gözetim altında kullanmalıdır in bir diş hekimi. Kanama, rahatsızlık hissederseniz, ağrı veya diğer tıbbi problemler, danışın Bir diş doktor.
5. Bu cihaz insanlar tarafından kullanılmamalıdır. (bu çocukları da içerir) fiziksel yeteneklere sahip, sınırlı duyuşal veya zihinsel faktörler veya hiç deneyim o bilgi, altında olmadıkça gözetim altında tutmak veya cihazın güvenliğinden sorumlu başka bir kişi tarafından kullanımına ilişkin talimatlar almak. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar izlenmelidir.
6. Fırça başlıklarını başkalarıyla paylaşmayın.
7. Fırça başlığını her üç ayda bir değiştirmenizi öneririz. Fırça başlığı hasar görmüş veya deforme olmuşsa hemen değiştirin.
8. Bu ürün yalnızca elektrikli diş fırçası için fırça başlıklarıyla uyumludur Resmi olmayan fırça başlıklarının kullanılması sonuırlarından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Mevzuata Uygunluk Bilgileri

FCC Uyarısı

Bu cihaz, Bölüm 15 ile uyumludur. Standart FCC'nin. Kullanım aşağıdakilere tabidir
İki koşul:

Bu cihaz neden olama Girişim zararlı ve

Bu cihaz herhangi bir girişim	girişim dahil olmak üzere alınan alışmamaya neden olabilecek
İstenen.	Herhangi bir değışiklik veya modifikasyon Tarafa açıka
onaylanmış sorumlu	uyum, yetkisini geçersiz kılabılır. kullanıcıyı kullanarak kullanın.

Not : Bu cihaz test edilmiş ve Kontrol için sınırlamaları karşılayan B Sınıfı dijital cihaz, uyumlu ile FCC Kurallarının 15. bölümü. Bunlar sınırlamalar sağlamak için tasarlanmıştır Bir parazitte karşı makul koruma bir konut kurulumunda zararlı. Bu cihaz enerji üretir, kullanır ve yayabilir radyo frekansı ve eğer kurulmamışsa ve kullanılmamışsa anlaşma talimatlarla neden olabilir zararlı girişim İletişim radyo ile. Ancak, bunun garantisi yoktur. bir müdahale yok Kurulum belirli. Bu cihaz parazitte neden oluyorsa zararlı radyo alımı veya televizyon Kapatılarak ve Cihazı açarak,

tavsiye edilir kullanıcı düzeltmeye çalışan bir veya daha fazlasının müdahalesi
Ertesi ölçüm:

· Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.

arasındaki ayırma mesafesini artırın cihaz ve alıcı.

Cihazı bir elektrik prizine bağlayın içinde devrenin bulunduğu devreden farklı Reseptör.

* Bayiye veya bir teknisyene danışın Deneyimli yardım için.

Cihaz, gereksinimleri karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. gereksinim radyo frekansına (RF) genel maruz kalma.

Cihaz aşağıdaki koşullarda kullanılabilir: sergileme Kısıtlama olmaksızın taşınabilir.

HF Dikkat

Bu cihaz RSS Muafiyeti ile uyumludur in Industry Canada tarafından lisanslanmıştır. Kullanım şunlara tabidir: a aşağıdaki iki koşula:

- (1) Bu cihaz neden olamaz Girişim ve
- (2) Bu cihaz herhangi bir girişim olabilecek parazit dahil istenmeyen çalışmasına neden olur aygıt.

Cihaz, gereksinimleri karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. gereksinim radyo frekansına (RF) genel maruz kalma.

Cihaz aşağıdaki koşullarda kullanılabilir: sergileme Kısıtlama olmaksızın taşınabilir.

Operasyona iki koşul altında izin verilir Ertesi:

- (1) cihaz parazite neden olmayacaktır, et
- (2) Cihazın kullanıcısı herhangi bir Sıkışmış Parazit olsa bile radyo frekansı paraziti tehlikeye atması muhtemeldir. işlem. Cihaz, gereksinimleri karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir.

genel RF'ye maruz kalma gereksinimleri. Cihaz Peut maruz kalma koşulları altında kullanılabilir sınırsız taşınabilir.

Paket İerięi ve zellikleri

rn zellikleri Adı rn :

Elektrikli Fıra Dalgası Modeli: LFTB01-S/LFTB01-A/LFTB01-P

alıřma gerilimi : 7.6V

řarj Sresi : 2,5 saat~

IP kodu : IPX7



Çalışma Gücü : 6W

Şarj Girişi : 5V

Pil Kapasitesi: 900mAh

Fırça başlığının seçilmesi yeterli



Dış Eti Bakımı (CS) Ultra ince, yumuşak kıllar dişler arasında, ki bu Hem iç mekanda nazik temizlik sağlar. dişlerde olduğu gibi diş etleri. İçin uygun sorunsuz bir deneyim arayan insanlar günlük fırçalamanız.



Süper Temiz (GS)

Uyan C-şekilli kıl tasarımı dişlerin yüzeylerine uyum sağlar. Hiçbir şey bırakmayan kapsamlı temizlik sağlar temizlenmemiş alanlar. Şu kişiler için uygundur: beyazlatan ve beyazlatan etkili fırçalama arıyorlar.

Dişleri temizleyin.



Ultra Beyazlatma (ABD)

Artan W şeklinde kıl tasarımı

Daha parlak bir gülümseme için cilalama alanı.

Arayan insanlar için uygundur

Dişleri beyazlatmak için güçlü temizlik.

Fırçalama Deneyiminize Başlamak

1. Takma ve değiştirme fırça

fırça kafasının kıllarını fırça başlığıyla hizalayın. kısım diş fırçası sapının önü.

Fırça kafasını aşağı doğru bastırın zarf tutumağa takmak için motor mili, hafif bir boşluk olduğundan emin olmak ^{arasında} her iki parça (<1'lik bir boşluk gereklidir çalışma için mm).


Değiştirme : Kolu tutun ve itin Yumuşak Yukarı doğru fırça başlığı Kaldırmak. Ardından, yeni kafayı takın in fırça.

2. Açma/kapama ve modlar arasında geçiş yapma

Güç düğmesine bir kez basın. Gir/duraklat ve geçiş yapmak için iki kez basın Modlar arasında:

- ① Mod 1: ilk kullanım için uygun ve Kullanıcı hassas dişlerle.
- ② Mod 2: günlük kullanım ve kullanıcılar için uygundur ne Mükemmel temizlik sonuçları ararlar.
- ③ Mod 3 : kullanıcılar için uygundur Aramak plak çıkarma ve yoğun beyazlatma.

Çalışma sırasında tek bir basış Koyar Fırçalama duraklatıldı. Duraklatılırsa 10 saniye boyunca diş fırçası etkinleşir bu uyku modu.

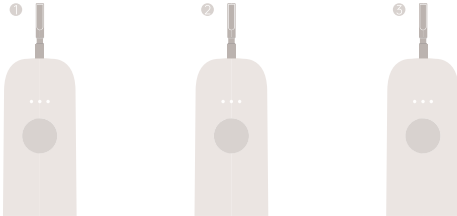

Daha Akıllı Özellikler Akıllı Aktivasyon: Doğru Dikey Diş Fırçası böylece artık duraklatılmaz. bu göstergeleri Açık ve böylece yanacaklar.

Fırçalama Zamanlayıcıları: 2'den sonra Otomatik uyku modu mod etkinleştirildikten sonra sıfırlanacak Uygulamaya 1 ila 5 dakika arasında sığdının uygulamada etkinleştirilmiştir. bu Fırçalama alanının değiştirilmesini isteyin. girmek için 2 saniye boyunca gücü açın. Uçak modundan çıkın.

Uygulamaya bağlanma Kodu tarayın uygulama mağazanızdan uygulama. Eğer zaten Vardı Uygulamayı indirdikten sonra, şunlardan emin olun: en son sürümdür ve posta elektronik.

tutanak kullanıldığında diş fırçası titreyecek ve etkinleşecektir Zamanlayıcıduraklamadan etkilenmez, ancak in süspansiyon). Bu zamanlayıcı olabilir SüreFırçalama; 30 saniyelik hatırlatma dişlerHer 30 saniyede bir iki kez titreyecektir. YolUçak: Herhangi bir durumda, yoluçak; 2 saniye basılı tutun

QR ileindirmek ve yüklemek için cep telefonunuz QR ileindirmek ve yüklemek için cep telefonunuz

Uygulamaya bağlanma

QR kodunu cep telefonunuzla tarayın uygulamaların. Zaten indirmiş olsaydınız uygulama En çok olduğundan emin olun ve e-postanızı kullanarak kaydolan elektronik.

Pil Yüzdesi: %100-%50 %50-%20 %20-%10 %10-%1 Durum Göstergesi: uz yeşil sabit sarı ışık sabit kırmızı ışık yanıp sönen kırmızı ışık

Pil Yüzdesi: %0Durum Göstergesi: Motor durana kadar her 0,5 saniyede bir yanıp sönen kırmızı ışık

titremek

İndirmek için

ve uygulamayı mağazanızdan yükleyin

Yükleme Bilgileri

Diş fırçanızı şarj etmeniz gerekebilir önce ilk kez kullanmak için. Lütfen aklınızda bulundurun Yükleme sırasında aşağıdakiler:

1. Cihazın alt kısmını düzgün şekilde bağlayın. fırçamanyetik şarj kablosu ile.
Cihaza zarar vermemek için güç kullanmaktan kaçının.
2. Manyetik şarj kablosunu bir Bağdaştırıcı ve bir
100-240V, 50-60Hz AC güç çıkışı. Gli şarj göstergeleri ve ilgili seviyeler
pil aşağıdaki gibidir:

Pil Yüzdesi: %100 %99-%0 Durum Göstergesi: Sabit Yeşil Işık Yanıp Sönen Yeşil Işık

Bu ürün bir ve biri ayrı olarak satın alınmalıdır. Kaçınmak Cihazı aşağıdaki gibi nemli ortamlarda şarj etmek Banyo elektrik güvenliğini sağlamak için.

Pil Silinmesi Hakkında Bilgi

Ladron Elektrikli diş fırçası şunları içerir: Pil şarj edilebilir lityum iyon piller. Genel olarak, Bu pillerin ömrü ve ömrü değişiklik gösterir ile kullanın, bu nedenle onları yüksüz bırakmaktan kaçının veya uzun süre kullanılmadı.

Dikkat : Cihazı açmayın, zarar vermeyin veya açığa çıkarmayın. Pil iletken malzemelere (metal), neme, sıvı, ateş veya ısı. Bunu yapmak şunlara yol açabilir: Sızıntı pillerde veya patlayabilir, bu da kişisel yaralanmaya neden olmak. Pil Şarjlı olabilecek maddeler içerir çevreye zarar verir ve gerektirebilir Demontaj yasaları göre uygun geri dönüşüm için ülkenizin veya bölgenizin. Rehberlik için profesyonel pili çıkarırken veya

Piller çıkarılmaz, bkz. Hemen a veya elektrikli diş fırçasını alın a belirlenen bir geri dönüşüm merkezine hükümet.



Pil çıkarma adımları:

- Diş fırçasının olmadığından emin olun Dir Yükleme.
- Diş fırçasının olduğundan emin olun kapalı.
- Diş fırçasının alt kapağını açın elektrikli.
- Bağlantı kablolarını Araçları yalıtıma sahip olduklarını.
- Gövdenin yan kapaklarına bastırın. Sökmeye tüm set ve sonra Pili çıkarın.

* Pili çıkardıktan sonra şunları yaptığınızdan emin olun: bu diş fırçası bir Güç kaynağı.

İade Politikası

Hizmet dönmek 30 günden itibaren
30 günlük iade hizmeti sunmaktadır. İçinde Bir Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde,
Bizden biriyle iletişime geçebilirsiniz. Temsilci Müşteri Hizmetleri
csteam@laifentech'da e-posta ile. iade sürecini başlatmak için.
Para iadesine hak kazanmak için şunları yapmalısınız:

- Ürünü tüm aksesuarlarıyla birlikte iade edin ^{ve} Hediye ler dahildir.
- Onları orijinal ambalajlarında iade edin.
- Geçerli bir satın alma belgesi sağlayın.
- Ürünün ve Aksesuarlar yeniden satılabilir.

İadeler için nakliye masrafları:

- Laifen nakliye masraflarını karşılayacaktır. bu kalite sorunları nedeniyle iadeler ürün.
- Herhangi bir nedenle iade olmak Ürün kalitesi sorumluluktur
ve bununla ilgili tüm maliyetler sevkıyat, dönmek maliyetleri de dahil olmak üzere ürünün müşteri tarafından karşılanacaktır.

Laifen Garanti ve Destek 1 yıllık sınırlı garanti

Laifen 1 yıllık sınırlı garanti sunar için Laifen Elektrikli diş fırçası ve kablosu orijinal manyetik yük. Bir satın alma tarihinden itibaren yıl, eğer ürününüz kusurlar nedeniyle düzgün çalışmıyor Malzeme o üretim, sağlayacağız onarım veya değiştirme hizmetleri. Akınızda bulunsun hesap bu, mevcudiyetine bağlı olarak stok, yedek ünite gelebilir içinde farklı bir renk veya eşdeğer bir model olabilir.

Garanti kapsamında olmayanlar:

Fırça başlıkları

Yetkili olmayan satıcılardan yapılan satın alımlar.

Garanti süresi dolmuş ürünler.

Geçerli bir satın alma belgesi olmayan ürünler.

- Değiştirilmiş, değiştirilmiş ürünler veya gayri resmi olarak onarıldı.
- Herhangi bir amaç için kullanılan ürünler amaç dışlarınızı fırçalamak dışında.
- Olmayan faaliyetlerin neden olduğu hasar ayarlamak Laifen kullanım kılavuzuna.

Herhangi bir yanlış kullanımdan kaynaklanan hasar veya kaza.

Aşırı kullanımdan kaynaklanan hasarlar olmak normal aşınma ve yıpranma. fırça
Laifen'in olmayanları.

- Kullanımından kaynaklanan hasar

Profesyonel yardım alın Laifen

Bizimle ilgili başka sorularınız varsa

ürünün garantisi veya kullanımı, lütfen çekinmeyin

Posta yoluyla bize ulaşır

elektronikBiz csteam@laifentech.com

Yorumlarınız çok fazla ve bunu yapabilmeyi umuyoruz Yardım.

Daha fazlası için bilgi
Web sitesini ziyaret

ürünün kullanımı hakkında,
Web Resmi: www.laifentech.com



Dongguan Laifen Elektronik Teknoloji A.Ş.
Dirección: Oda 201, Bina 3, No.2 Singhai Hakkında Yol, Songshanhu Teknoloji Parkı,
Dongguan, Guangdong, Çin.